



EUROPAULTRATM CTO

Catéter balón para oclusiones totales crónicas - NUEVO diámetro de 1,00 mm y catéter de tipo OTW (coaxial)

“Perfiles más bajos con capacidad de empuje mejorada para incluso los casos más exigentes”

Cardiología intervencionista


acmedica[®]
medical solutions

EUROPAULTRATM

CTO Catéter balón

Seguimiento mejorado

- Perfil ultra bajo de Ø,016" con punta suave y duradera, que se ha diseñado para atravesar oclusiones totales crónicas.
- Marcador central de platino-iridio para lograr una mejor radiopacidad y perfiles más bajos en la parte distal del balón, lo cual permite una capacidad de cruce mejorada.
- La combinación exclusiva de materiales de Rontis garantiza que el perfil sea muy bajo y una gran durabilidad de los balones.
- Capacidad para soportar presiones altas, lo cual aporta una resistencia extrema a posibles pinchazos.
- Presión de rotura promedio: 26 bar
- Expansión homogénea en toda la longitud del balón.
- El revestimiento hidrofílico exclusivo de Rontis, HiFlow, suaviza la navegabilidad a través de incluso las vasculaturas más exigentes.
- Cuerpo de perfil bajo, lo que garantiza una mayor capacidad de penetración.
- La transición plenamente integrada entre el cuerpo y el hipotubo optimiza la capacidad de empuje.

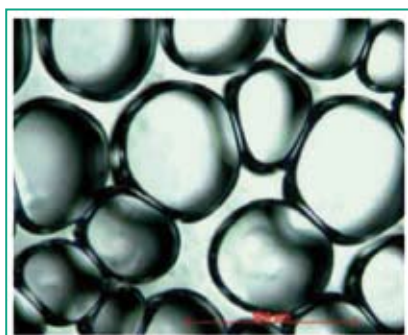

acmedica[®]
medical solutions



DATOS TÉCNICOS

Modo de intercambio:	Rx / OTW (coaxial)
Características/material del balón:	poliamida modificada/semidistensible
Marcadores radiopacos:	1 de platino-iridio
Compatibilidad con catéter guía (min.):	5F
Longitud utilizable del catéter:	140 cm
Parte distal del cuerpo (Rx):	2.4F
Cuerpo de doble lumen (OTW-coaxial):	2.6F
Hipotubo:	2.0F
Compatibilidad con guía (máx.):	0.014"
Presión nominal:	8 bar
Presión de rotura nominal:	16 bar
Presión de rotura promedio:	26 bar
Revestimiento:	Hidrofílico, HiFlow
Vida útil total:	3 años

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Código (Rx)	Diámetro del balón (mm)	Longitud del balón (mm)	Código (OTW-coaxial)
EC10/08	1.00	8	EO10/08
EC10/12		12	EO10/12
EC10/16		16	EO10/16
EC10/20		20	EO10/20
EC12/10	1.25	10	EO12/10
EC12/15		15	EO12/15
EC12/20		20	EO12/20
EC15/10	1.50	10	EO15/10
EC15/15		15	EO15/15
EC15/20		20	EO15/20

1 French (Fr) = 0.33 mm 1 pulgada = 25.45 mm 1 bar = 100 kPascal 0.987 Atm = 14.505 psi

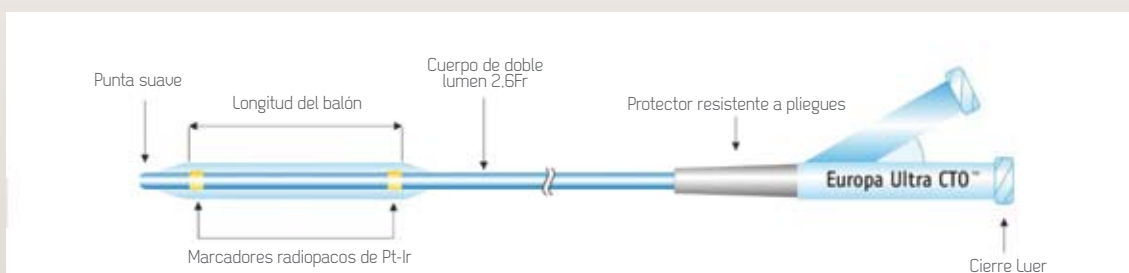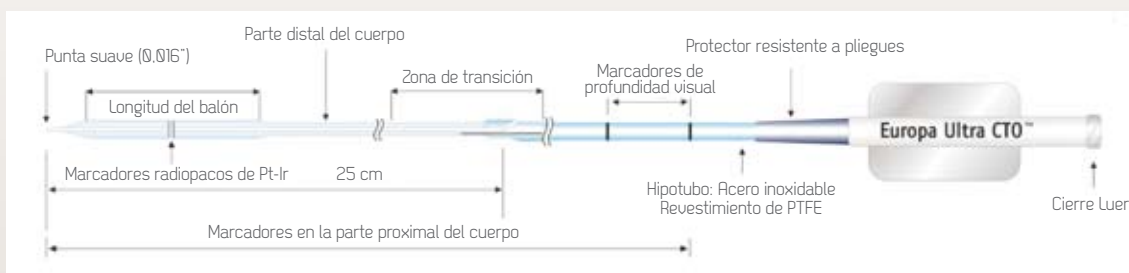

INFORMACIÓN

Este producto se utilizará en un plazo máximo de 3 años a partir de su fabricación.
Para obtener información adicional póngase en contacto con el fabricante:

RONTIS AG

Bahnhofstrasse 7,
CH 6301 Zug,
SUIZA
TEL.: +41 (0) 41 72 04 212
FAX.: +41 (0) 41 72 04 213

O con el distribuidor en España:

acmedica[®]
medical solutions

Calle Dionisio Ridruejo n.º 2 • 1.º - Ext.
33008 • Oviedo
Tel. 902 830049 • Fax. 984 283718
acmedica acmedica.es
www.acmedica.es

