



“La nueva primera opción en guías”

Cardiología intervencionista

acmedica®
medical solutions

LOTUS II™

Guía de 0,014"

La nueva guía Lotus II™ se ha diseñado para ofrecer una zona de transición suave y estable entre el núcleo y la punta, de forma que se garantizan unas posibilidades de manipulación óptimas.

- **Diseño en acero inoxidable** que evita que se enrolle el núcleo y se deforme la guía (excelente capacidad de torsión).
- **Transición especial del borde** que minimiza el prolapso de la punta.
- **Revestimiento hidrofílico** que aporta un mejor seguimiento.
- **Retención muy efectiva** del diseño de la punta.
- **Cuerpo con revestimiento de PTFE.**
- **Navegabilidad suave y atraumática.**
- **Radiopacidad óptima.**
- **Las variaciones en la rigidez de la punta** posibilitan un abordaje gradual en la penetración de las lesiones. La carga de la punta está disponible en 0,60 gramos (estándar), 0,45 gramos (intermedia) y 0,30 gramos (flexible).
- **Asimismo, se utiliza en aplicaciones periféricas**, como en casos por debajo de la rodilla.




- **La compatibilidad normal** aporta un equilibrio entre flexibilidad y soporte para lograr una inserción óptima de la guía, además de compatibilidad para acoplar la mayoría de los dispositivos intervencionistas.
- **La compatibilidad adicional** es idónea para los casos más exigentes, y ofrece mayor compatibilidad con carriles.



acmedica®
medical solutions

DATOS TÉCNICOS

Diseño:	Acero inoxidable del centro a la punta
Carga de la punta:	0,30 - 0,45 - 0,60 gr
Forma de la punta:	Recta (R), en forma de "J" (J)
Punta distal de coil radiopaco:	30 mm
Diámetro exterior:	0,014"
Revestimiento:	Hidrofílico
Longitud:	195 - 300 cm
Compatibilidad:	Normal (N), Adicional (A)

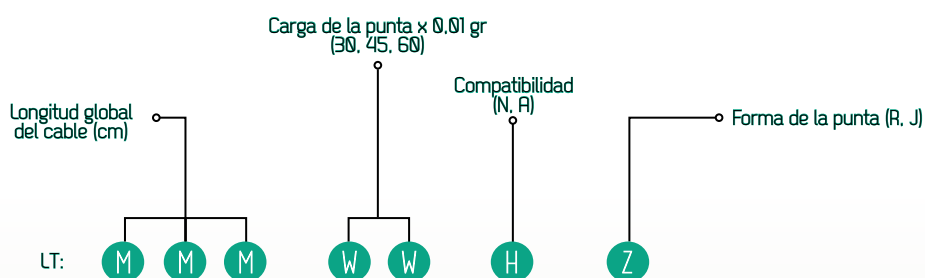

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Carga de la punta (gr)	Compatibilidad normal	Compatibilidad adicional	Compatibilidad normal	Compatibilidad adicional
0.30	LT 195/30NS	LT 195/30XS	LT 300/30NS	LT 300/30XS
0.45	LT 195/45NS	LT 195/45XS	LT 300/45NS	LT 300/45XS
0.60	LT 195/60NS	LT 195/60XS	LT 300/60NS	LT 300/60XS
0.30	LT 195/30NJ	LT 195/30XJ	LT 300/30NJ	LT 300/30XJ
0.45	LT 195/45NJ	LT 195/45XJ	LT 300/45NJ	LT 300/45XJ
0.60	LT 195/60NJ	LT 195/60XJ	LT 300/60NJ	LT 300/60XJ

1 French (Fr) = 0,33 mm 1 pulgada = 25,45 mm 1 bar = 100 kPascal 0,987 Atm = 14,505 psi

INFORMACIÓN

Este producto se utilizará en un plazo máximo de 3 años a partir de su fabricación.
Para obtener información adicional póngase en contacto con el fabricante:

RONTIS AG

Bahnhofstrasse 7,
CH 6301 Zug,
SUIZA
TEL.: +41 (0) 41 72 04 212
FAX.: +41 (0) 41 72 04 213

O con el distribuidor en España:

acmedica[®]
medical solutions

Calle Dionisio Ridruejo n.º 27 Ext.
33008 Tiviedo
Tel. 902 830049 Tfax. 984 283718
acmedica acmedica.es
www.acmedica.es